


# Algoplaque®

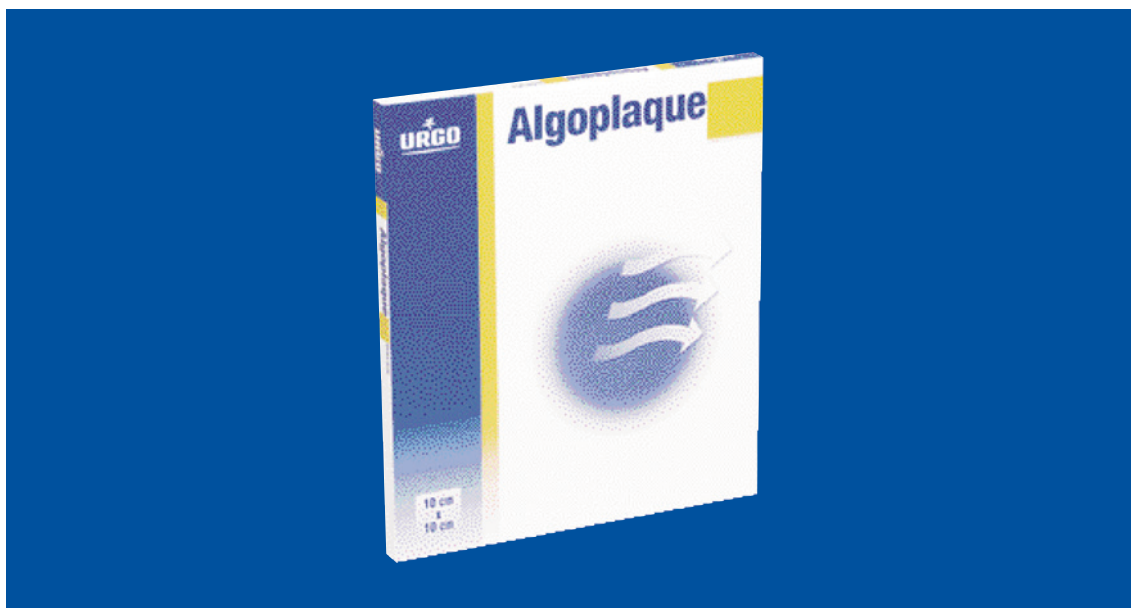


## PANSEMENT HYDROCOLLOÏDE STÉRILE STANDARD

### Algoplaque®

Pansements sous emballage individuel stérile conditionnés en boîte

CODE	DIMENSIONS	PRÉSENTATION nombre UCD/BOÎTE	GROUPAGE	
			nombre UCD	nombre BOÎTES
2881	Standard : 10 x 10 cm	16	160	10
5845	Moyen : 15 x 15 cm	10	80	8
5843	Grand : 20 x 20 cm	10	80	8

# Algoplaque®

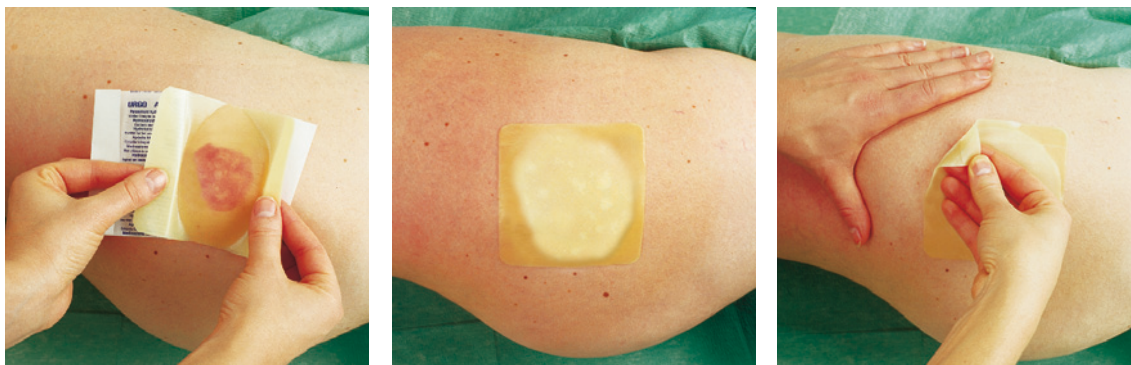

## DESCRIPTION

### COMPOSITION :

- Pansement hydrocolloïde stérile semi-perméable.
  - La couche interne est composée de particules hydrocolloïdes (carboxyméthylcellulose) insérées dans un réseau élastomère.
  - La couche externe, imperméable à l'eau et aux bactéries, est un support semi-perméable en polyuréthane.

**PRÉSENTATION :** Conditionnement individuel stérile.

**MODE DE STÉRILISATION :** Radiostérilisé.

## PROPRIÉTÉS

- Au contact de la plaie, les particules hydrocolloïdes d'**Algoplaque**® absorbent progressivement les exsudats, gonflent pour former un gel de comblement doux et humide favorable au processus cicatriciel en terme d'hydratation, de température et de pH. Ce gel non adhérent évite que le tissu cicatriciel soit endommagé lors des renouvellements de pansements.
- La grande souplesse et l'excellente adhésivité aux pourtours de la plaie permettent à **Algoplaque**® d'épouser les différentes régions anatomiques.
- La transparence de son support permet le contrôle permanent de la formation et de l'aspect du gel.
- Les pansements de la gamme **Algoplaque**® sont perméables à l'air et imperméables à l'eau et aux bactéries. Ces propriétés autorisent la poursuite des bains ou des douches, assurent la protection de la plaie vis-à-vis des contaminations extérieures, et permettent les échanges gazeux, favorisant le drainage des exsudats.
- Stérile.

## INDICATIONS

**INDICATIONS :** Soins locaux des ulcères de jambe et des escarres au stade de bourgeonnement.

**CONTRE-INDICATION :** Ne pas utiliser en cas d'infection.

## CONSEILS D'UTILISATION

### MODE D'EMPLOI :

- **1 - Préparation de la plaie :**
  - Nettoyer la plaie selon les techniques habituelles.
  - Sécher soigneusement avec une compresse stérile, en particulier sur le pourtour de la plaie.
- **2 - Application du pansement :**
  - Oter le film de protection.
  - Appliquer sur la plaie en évitant de toucher la face adhésive avec les doigts.
  - Lisser le pansement doucement sur la plaie et plus fermement à la périphérie.
- **3 - Renouvellement du pansement :**
  - Au stade de bourgeonnement, sur une plaie propre, uniformément détergée, **Algoplaque**® sera renouvelé à saturation (tous les 3 à 4 jours en moyenne selon l'importance de l'exsudation).
  - Pour un retrait indolore, effectuer un retrait tangentiel en tirant le support parallèlement à la plaie.
  - Au retrait du pansement, le fond de l'ulcération cutanée peut être recouvert d'un enduit gélatineux qui s'élimine facilement par simple lavage.
  - Dans le cas d'une plaie très fortement exsudative, l'écoulement de substance gélatineuse autour du pansement nécessite son renouvellement.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- L'utilisation d'**Algoplaque**® sur une ulcération d'origine veineuse ne dispense pas du traitement compressif éventuellement prescrit.
- Ne pas utiliser en cas de détérioration du protecteur de stérilité.
- Durée de conservation : 5 ans.

## STATUT RÉGLEMENTAIRE

Dispositif médical marqué CE 0459.


Inscrit sur la Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR).

CE 0459

09/2007

# Algoplaque® Sacrum

# Algoplaque® Border

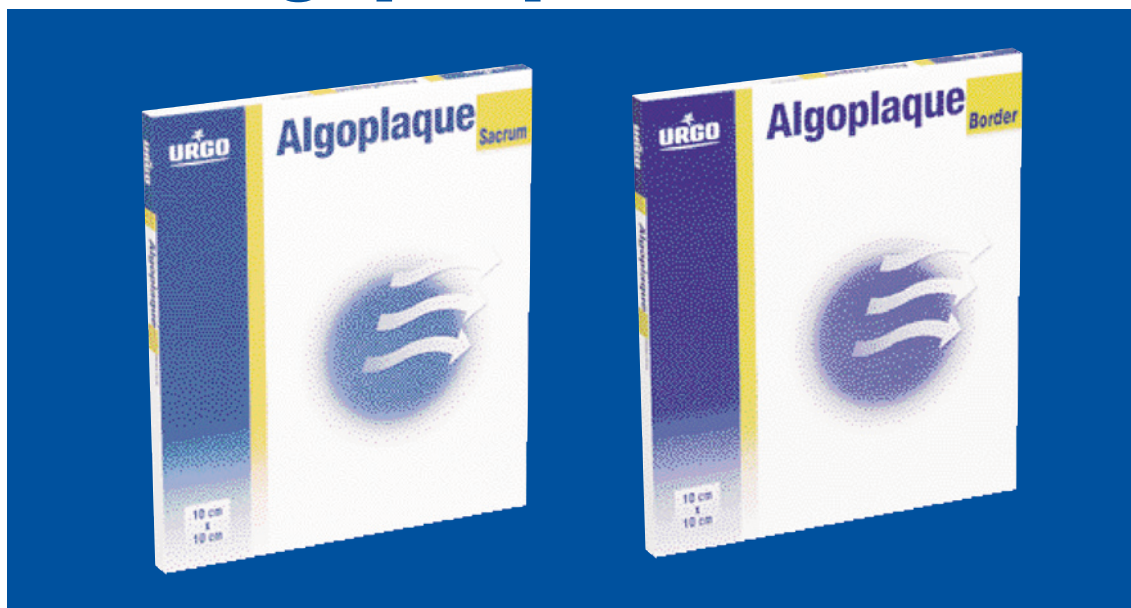

## PANSEMENT HYDROCOLLOIDE STÉRILE

### Algoplaque® Border

Pansements sous emballage individuel stérile conditionnés en boîte

CODE	DIMENSIONS	PRÉSENTATION nombre UCD/BOÎTE	GROUPAGE	
			nombre UCD	nombre BOÎTES
5849	14 cm x 14 cm	10	200	20



### Algoplaque® Sacrum

Pansements sous emballage individuel stérile conditionnés en boîte

5847	14 cm x 16 cm	10	200	20
------	---------------	----	-----	----

# Algoplaque® Sacrum

# Algoplaque® Border

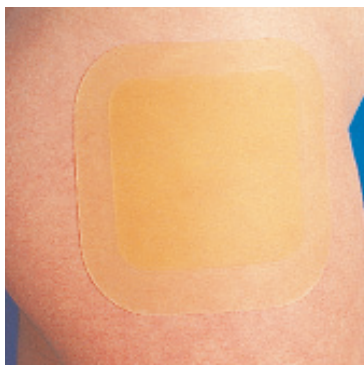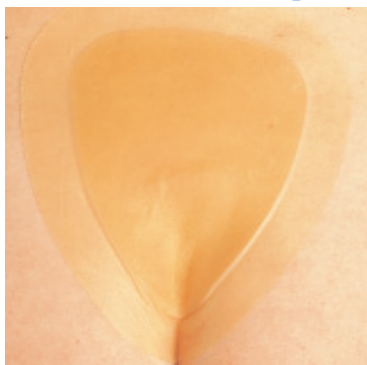

## DESCRIPTION

**Algoplaque® Sacrum** et **Algoplaque® Border** sont des pansements hydrocolloïdes stériles semi-perméables adaptés à certaines localisations anatomiques de l'escarre et d'adhésivité périphérique renforcée.

### COMPOSITION :

■ La partie interne centrale du pansement, destinée à venir en contact avec la plaie, est constituée d'hydrocolloïdes naturels appliqués sur un support en polyuréthane semi perméable.

■ La bordure périphérique du pansement, constituée d'un film hydrocolloïde extra-mince, renforce l'adhésivité du pansement autour de la plaie.

**PRÉSENTATION :** Conditionnement individuel stérile.

**MODE DE STÉRILISATION :** Radiostérilisé.

## PROPRIÉTÉS

- La forme spécifique d'**Algoplaque® Sacrum** le destine aux escarres de localisation sacrée. Sa bordure périphérique évite les décollements par frottement ou lors d'incontinence associée.
- La grande souplesse et l'adhésivité renforcée d'**Algoplaque® Border** le destine aux plaies de localisations difficiles (escarres trochantériennes, talonnières) soumises à des forces de frottement.
- **Algoplaque® Sacrum** et **Algoplaque® Border** se liquéfient au contact des exsudats de la plaie pour former un gel de comblement doux et humide favorable au processus cicatriciel lors du bourgeonnement et de l'épidermisation de l'escarre.
- Les pansements de la gamme **Algoplaque®** sont perméables à l'air et imperméables à l'eau et aux bactéries. Ces propriétés autorisent la poursuite des bains ou des douches, assurent la protection de la plaie vis-à-vis des contaminations extérieures, et permettent les échanges gazeux, favorisant le drainage des exsudats.
- Stérile.

## INDICATIONS

**INDICATIONS :** Soins des escarres.

**CONTRE-INDICATION :** Ne pas utiliser en cas d'infection.

## CONSEILS D'UTILISATION

### MODE D'EMPLOI :

#### ■ 1 - Préparation de la plaie :

- Nettoyer la plaie selon les techniques habituelles.
- Sécher soigneusement avec une compresse stérile, en particulier sur le pourtour de la plaie.

#### ■ 2 - Application du pansement :

- Oter le film de protection.
- Appliquer sur la plaie en évitant de toucher la face adhésive avec les doigts.
- De par sa forme spécifique, **Algoplaque® Sacrum** s'applique le sommet tourné vers le pli interfessier en essayant d'aplanir le pli pour une meilleure adhésivité immédiate et une protection totale en cas d'incontinence.
- Lisser le pansement doucement sur la plaie et plus fermement à la périphérie.
- La bordure adhésive d'**Algoplaque® Sacrum** et d'**Algoplaque® Border** évite de renforcer le pansement lors de l'application.

#### ■ 3 - Renouvellement du pansement :

- En fin de détersion des débris fibrino-nécrotiques, **Algoplaque® Sacrum** et **Algoplaque® Border** les ramollissent les déchets et accélèrent leur élimination.
- À ce stade, le pansement sera renouvelé tous les 1 à 2 jours en moyenne.
- Au stade de bourgeonnement, le pansement **Algoplaque®** sera renouvelé (à saturation tous les 3 à 4 jours en moyenne).
- Au stade d'épidermisation, le pansement sera renouvelé tous les 4 à 6 jours puis progressivement remplacé par **Algoplaque® Film**.

Au retrait du pansement, le fond de l'ulcération cutanée peut être recouvert d'un enduit gélatineux qui s'élimine facilement par simple lavage.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Ne pas utiliser en cas de détérioration du protecteur de stérilité.
- Durée de conservation : 5 ans.

## STATUT RÉGLEMENTAIRE


Dispositif médical marqué CE 0459.

Inscrit sur la Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR).

CE 0459 09/2007

  
**URGO**

# Algoplaque® Film

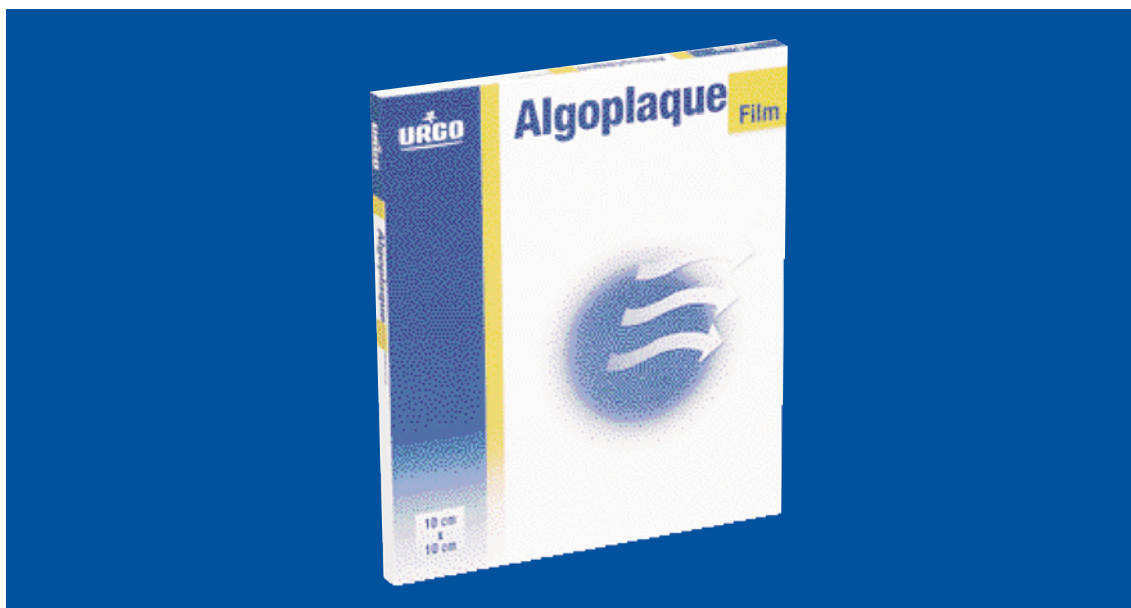

## PANSEMENT HYDROCOLLOÏDE STÉRILE EXTRA-MINCE

### Algoplaque® Film

Pansements sous emballage individuel stérile conditionnés en boîte

CODE	DIMENSIONS	PRÉSENTATION nombre UCD/BOÎTE	GROUPAGE	
			nombre UCD	nombre BOÎTES
5841	Petit : 5 x 10 cm	16	512	32
2828	Long : 5 x 20 cm	10	250	25
2832	Standard : 10 x 10 cm	16	160	10
5839	Moyen : 15 x 15 cm	10	80	8
5837	Grand : 20 x 20 cm	10	80	8

# Algoplaque® Film



## DESCRIPTION

Pansement hydrocolloïde stérile extra-mince.

### COMPOSITION :

- **Algoplaque® Film** est composé d'une masse hydrocolloïde appliquée sur un support protecteur.
- La masse, d'une épaisseur de 350 µm, est composée de particules hydrocolloïdes (Carboxyméthylcellulose) insérées dans un réseau élastomère.
- La couche externe est un support polyuréthane semi-perméable, imperméable à l'eau et aux bactéries.

**PRÉSENTATION :** Conditionnement individuel stérile.

**MODE DE STÉRILISATION :** Radiostérilisé.

## PROPRIÉTÉS

- **Algoplaque® Film** forme au contact de la plaie un gel humide qui crée les conditions favorables au mécanisme cicatriciel.
- **Algoplaque® Film** est translucide autorisant la surveillance de la plaie.
- La très grande souplesse et la grande conformabilité d'**Algoplaque® Film** permettent le recouvrement de toutes les zones corporelles.
- Les pansements de la gamme **Algoplaque®** sont perméables à l'air et imperméables à l'eau et aux bactéries. Ces propriétés autorisent la poursuite des bains ou des douches, assurent la protection de la plaie vis-à-vis des contaminations extérieures, et permettent les échanges gazeux, favorisant le drainage des exsudats.
- Stérile

## INDICATIONS

**INDICATIONS :** Soins locaux des plaies superficielles peu exsudatives en cours de formation (ulcères et escarres superficiels, plaies traumatiques), des plaies en fin de cicatrisation (stade de réépidermisation) et des plaies chirurgicales suturées.

**CONTRE-INDICATION :** Ne pas utiliser **Algoplaque® Film** sur des plaies infectées.

## INDICATIONS

### MODE D'EMPLOI :

- **1 - Préparation de la plaie :**
  - Nettoyer la plaie selon les techniques habituelles et sécher soigneusement le pourtour de la plaie avec une compresse stérile.
- **2 - Application du pansement :**
  - Choisir le format d'**Algoplaque® Film** de façon à laisser déborder le pansement de 2 à 3 cm en peau saine.
  - Enlever le papier protecteur et appliquer **Algoplaque® Film** sur la plaie en évitant de toucher la partie adhésive avec les doigts.
  - Lisser le pansement doucement sur la plaie et plus fermement sur son débord en peau saine.
- **3 - Renouvellement du pansement :**
  - La fréquence de renouvellement d'**Algoplaque® Film** est dictée par le type de plaie et son stade évolutif.
  - Pour un retrait indolore, effectuer un retrait tangentiel en tirant le support parallèlement à la plaie.
  - Dans le cadre de plaies superficielles peu exsudatives, le pansement sera renouvelé tous les 4 à 6 jours.
  - Au retrait du pansement, la plaie peut être recouverte d'un enduit gélatineux qui s'élimine facilement et sans douleurs par simple rinçage.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- L'utilisation **Algoplaque® Film** sur une ulcération d'origine veineuse ne dispense pas du traitement compressif éventuellement prescrit.
- L'utilisation d'**Algoplaque® Film** sur une escarre de décubitus ne dispense pas de la poursuite du nursing habituel.
- Ne pas utiliser en cas de détérioration du protecteur de stérilité.
- Durée de conservation : 5 ans.

## STATUT RÉGLEMENTAIRE

Dispositif médical marqué CE 0459.

Inscrit sur la Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR).



09/2007